

Medtronic



Sistema PillCam™ SB3: uma maneira simples de avaliar o intestino delgado

Obtenha uma visão geral da sua saúde gastrointestinal





Dispositivo pequeno e amigável para visualização do intestino delgado.

Se você ou um ente querido sofre de hemorragia gastrointestinal (GI), doença de Crohn ou anemia por deficiência de ferro, pode ser que seu médico precise observar o interior do seu intestino delgado para avaliar sua condição.¹

Com o sistema PillCam™ SB3, isso é feito através de uma cápsula ingerível, do tamanho de um comprimido vitamina.

Este folheto explica o que acontece durante o procedimento, como é a preparação e o que esperar após o exame.*

Sistema PillCam™ SB3

O intestino delgado conecta o estômago ao intestino grosso e colabora no processo digestivo e em outras funções metabólicas. O sistema PillCam™ SB3 consiste em uma cápsula que pode ser ingerida e permite que seu médico visualize a totalidade do seu intestino delgado.



Como funciona o sistema PillCam™ SB3

A cápsula PillCam™ SB3 contém uma pequena câmera e uma fonte de luz, que capturam imagens do seu intestino delgado à medida que se desloca naturalmente pelo trato digestivo.

Essas imagens são transmitidas para um gravador preso a uma cinta colocada em torno do seu corpo. Sensores fixados no abdômen ou em um cinto sensor ajudam a transmitir essas imagens.




Perguntas frequentes

Quanto tempo dura o procedimento?

Geralmente, você passará cerca de 30 minutos no consultório médico para iniciar o procedimento.

Após a colocação dos sensores ou do cinto sensor no seu abdômen, a conexão do gravador e a ingestão da cápsula, você poderá ir embora. O exame pode durar até 12 horas.

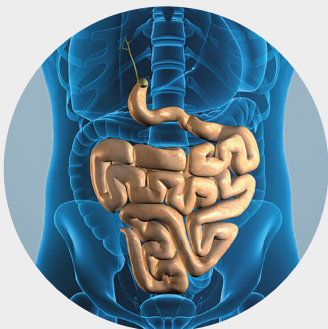

O que acontece depois que eu devolver o gravador e os sensores ao meu médico?

As imagens capturadas durante o procedimento serão transferidas para um computador, e seu médico as analisará em um vídeo colorido.

Depois, você será contactado(a) para receber os resultados.

A cápsula causa dor ou desconforto?

Não. Você não deve sentir desconforto ao engolir a cápsula PillCam™ SB3, nem enquanto ela se move pelo trato GI. A cápsula é descartável e será eliminada naturalmente com as fezes.

No entanto, se você sentir dor ou algum outro sintoma preocupante, entre em contato com seu médico imediatamente.

Quais são os riscos do procedimento?

Os riscos do sistema PillCam™ SB3 incluem a retenção ou aspiração da cápsula e irritação cutânea. A colocação endoscópica pode apresentar riscos adicionais.

Pode ser necessária uma intervenção médica, endoscópica ou cirúrgica para tratar quaisquer complicações que possam ocorrer.

Após ingerir a cápsula PillCam™ SB3 e até que ela seja excretada, os pacientes devem evitar a exposição a fontes de campos eletromagnéticos de alta intensidade, como os gerados por equipamentos de ressonância magnética. Consulte seu médico para mais informações.

Preparação para o procedimento com o sistema PillCam™ SB3

Alimentos e bebidas

Um estômago vazio é ideal para a visualização. No dia anterior ao procedimento, pode ser solicitado que você siga uma dieta líquida após o almoço e inicie um jejum à meia-noite. Seu médico fornecerá instruções específicas.

Medicamentos

Informe seu médico com antecedência sobre quaisquer medicamentos que você usa regularmente. Pode ser necessário ajustar a dose habitual para realizar o procedimento. No entanto, é importante discutir qualquer alteração com seu médico antes de modificar seus medicamentos.

Histórico clínico

Informe seu médico sobre seu histórico médico, incluindo:

- O uso de marcapasso ou outros dispositivos médicos eletrônicos.
- Cirurgias abdominais anteriores.
- Dificuldade para engolir.
- Histórico de obstruções no trato gastrointestinal.
- O uso da PillCam™ SB3 é contraindicado para pacientes com suspeita ou diagnóstico de estenoses ou fístulas.

Após o procedimento

Como não é necessária sedação, você pode deixar o consultório do médico e retomar suas atividades normais assim que engolir a cápsula PillCam™ SB3.

Salvo orientação médica contrária, você também poderá se alimentar quatro horas após a ingestão da cápsula.

Ao final do procedimento, a gravadora e os sensores serão removidos e devolvidos ao seu médico.

Seu procedimento está agendado para:

Para obter mais informações, entre em contato com:

Instruções do médico ou equipe de enfermagem:

* Este folheto é um complemento das orientações e explicações do seu médico em relação à ingestão da cápsula PillCam™ SB3.

Ele não substitui o atendimento, o aconselhamento ou as instruções específicas que você recebe do seu médico sobre a preparação para o procedimento.

Referência:

¹ Gerson LB, Fidler JL, Cave DR, Leighton JA. ACG clinical guideline: diagnosis and management of small bowel bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2015;110(9):1265-87.

Advertência: A legislação federal limita a venda deste dispositivo a profissionais de saúde credenciados ou mediante prescrição médica. Somente com receita.

Informações sobre riscos: Os riscos do sistema PillCam™ SB3 incluem a retenção ou aspiração da cápsula e irritação cutânea. A colocação endoscópica pode apresentar riscos adicionais. Pode ser necessária intervenção médica, endoscópica ou cirúrgica para tratar qualquer uma dessas complicações, caso ocorram. Após a ingestão da cápsula PillCam™ SB3 e até que ela seja excretada do corpo, os pacientes devem evitar exposição a fontes de campos eletromagnéticos de alta intensidade, como os gerados por equipamentos de ressonância magnética (RM). Consulte o seu médico para mais informações.

Medtronic
medtronic.com/gi

